


L'INTUBATION

LE PLATEAU D 'INTUBATION A PREPARER

- **Sondes d'intubations stériles** à usage unique de différentes tailles :
- Diamètre 7,5 - 9 : homme. Diam 7 - 8 : femme. Diam 6,5 - 7,5 : adolescent. Diam 5 - 6,5 : enfant.
- Sondes sans ballonnet : pour un diamètre de sonde < 5 afin d'éviter les lésions de la trachée :
- Diamètre 4 - 5 : jeune enfant. Diamètre 2,5 - 4 : nourrisson.

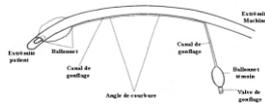

- **Laryngoscope + sa lame**



Taille 3 et 4 : adulte Taille 2 : enfant. Taille 1 : nourrisson .

- **Seringue de 10 ml.** avec de l'eau de préférence



- **Pince de Magill** : permet de diriger la sonde endotrachéale dans le larynx et faciliter sa direction dans la trachée.



- **Mandrin souple de heichman**: permet de modifier la courbure de la sonde d'intubation

- **cordon de fixation** pour la sonde d'intubation.

- **Matériel d'oxygénation :**

- Bouteille oxygène.
- BAVU avec masque adapté à la morphologie du patient
- Respirateur avec cordon le reliant à la bouteille d'O₂ et circuit patient.

- **Matériel d'aspiration :** .

- **Autre matériel :**

- Stéthoscope. .
- Gans non stérile à usage unique.
- Sac à élimination des déchets.
- Nécessaire à l'hygiène des mains.

FIXATION DE LA LACETTE



REGLAGE DU RESPIRATEUR (sous contrôle du médecin)



FiO2 (quantité d'O2 délivrée au patient) 50%
FR : fréquence respiratoire du patient 15 à 20
VOLUME : 6 à 8 ml/kg

PREPARER UNE PERFUSION

Pose de la tubulure

- Se désinfecter les mains
- Enlever la protection du site d'insertion
- Désinfecter le site avec une compresse imbibée de désinfectant alcoolique
- Préparer la tubulure et fermer la pince compte-gouttes
- **Introduire dans le flex le trocart de la tubulure bien à fond en le tournant** car sa fixation est assurée par le tube intérieur qu'il doit perforer
- Contrôler la bonne tenue
- Suspendre la perfusion
- Remplir le stilligoutte en dessous de la ligne maximum 1/3 (en appuyant dessus)
- Purger soigneusement la tubulure
- Garder l'extrémité de la tubulure stérile
- Se désinfecter les mains

PREPARER UNE DROGUE DANS UNE AMPOULE



Prendre une seringue adaptée au volume de l'ampoule,
Une aiguille rose (appelé pieux)
Une compresse imbibée de désinfectant

Casser l'ampoule avec la compresse à sa partie la plus mince
Verticaliser l'ampoule
Introduire l'aiguille dans l'ampoule et aspirer le produit

PREPARER UNE DROGUE DANS UN FLACON



Enlever le capuchon métallique à l'aide d'une pince kocher
Nettoyer le bouchon caoutchouc avec une compresse imbibée d'alcool
Retourner le flacon
Introduire l'aiguille au centre du caoutchouc et aspirer le produit